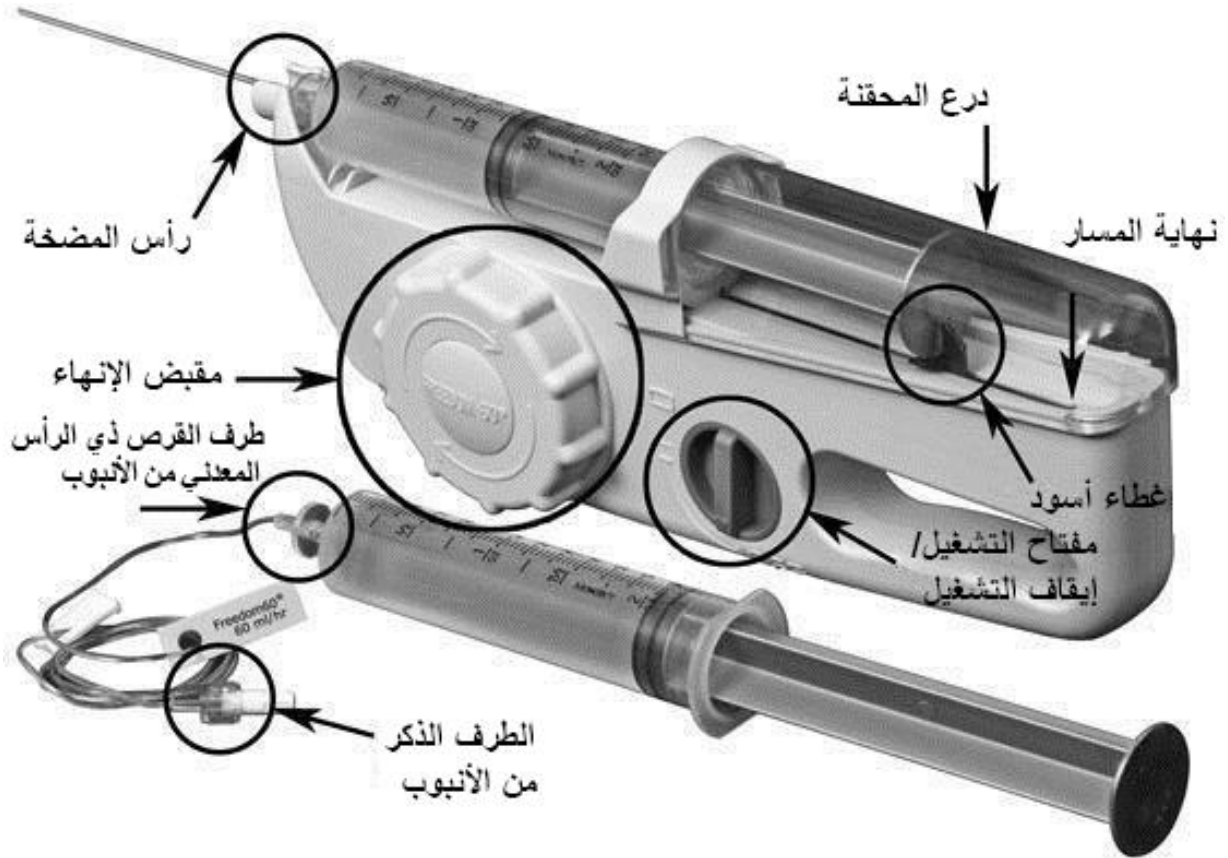


FREEDOM 60 تناول الدواء عبر مضخة

إدارة الدواء بشكل سليم عبر مضخة حقنة Freedom 60 مهم لسلامتكم. رجاء الاتصال بـ 1-800-755-4704 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات على الإطلاق بشأن تناول الدواء. متواجدون على مدار 24 ساعة، وخلال 7 أيام بالأسبوع. في حالة الطوارئ، اتصل دائماً برقم 911.

للأدلة التعليمية وفيديوهات الإرشاد:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

إجراء الغسل SASH (Saline) "محلول ملحي"، Administer infusion "إجراء التسريب"، Saline "محلول ملحي"، Heparin "هيبارين":

س.م سائل ملحي _____ مللي
تناول الدواء حسب تعليمات الممرضة
س.م سائل ملحي _____ مللي
هـ هيبارين _____ مللي (عند الطلب)

التجهيزات:

- حقنة الدواء
- مضخة Freedom 60/تدفق دقيق - الأنبوب (يجب تغيير الأنبوب يوميًا)
- (2) حقنة مسبقة التعبئة من كلوريد الصوديوم (سائل ملحي)
- (1) حقنة هيبارين مسبقة التعبئة
- (1) غطاء رأس الحقنة بلون أزرق فاتح
- مسحات طبية/كحولية

الإجراءات:

1. تنظيف منطقة العمل. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل. جمع التجهيزات.
2. التحقق من تسمية الدواء والمادة الفعالة وعدد مرات تناوله وصلاحيته. التحقق من حقنة الدواء في حالة الفتحات والتسربات ومادة معينة وصفاء الدواء. تواصل مع Chartwell في حالة وجود أي تعارضات أو استفسارات.
3. قم بإعداد المحاقن المعبأة مسبقًا لغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات الممرضة.
- تنبيه هام للسلامة: تحقق من أن لديك أنبوب تدفق دقيقًا من نوع Freedom 60 الصحيح. المعدل المطبوع على العبوة يجب أن يطابق المعدل المحدد من الطبيب (تحقق من ملصق الوصفة الطبية).
4. أزل الأنبوب من العبوة.
5. أرفق أنبوبًا دقيقًا من نوع Freedom 60 إلى نهاية قرص محقنة لور لحقنة الدواء. (أزل الأغشية الحمراء للعلق من حقنة الدواء).
6. تأكد أن مضخة Freedom في وضع **التعطيل** وأن اللسان الأسود بنهاية المسار. لتحريك اللسان الأسود، لف المقبض الكبير باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع الضغطة. لا تكرر لفها

إدارة الدواء:

7. أدخل حقنة الدواء داخل الأنبوب المرفق، ثم اضغط النهاية الأولى في الغطاء الشفاف بالمضخة. تأكد من تثبيت نهاية قرص محقنة لور في مقدمة المضخة بشكل قوي. (شاهد الفيديو الإرشادي)
8. بدء الضخ بالأنبوب الدقيق/من نوع Freedom 60 من خلال تحويل المضخة لوضع **التشغيل**. أزل غطاء فتحة النهاية حتى ملاحظة قطرة من السائل بنهاية الأنبوب، ثم أعد تركيب غطاء فتحة النهاية. ملاحظة: ثبت الحقنة في وضعها حتى يمسك اللسان الأسود الحقنة لمنعها من الانفصال.



9. حول المضخة إلى وضع التعطيل.
10. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
11. قم بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.
12. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.
13. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية جديدة بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
14. أزل غطاء الحماية بنهاية الأنبوب الدقيق/من نوع Freedom 60 وأرفق الأنبوب لغطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية. ***احرص على تجنب لمس طرف الأنبوب**.**
15. حول المضخة إلى وضع التشغيل.
16. تناول الدواء بمضخة Freedom حسب خطة الدواء من Chartwell، ومراقبة تقدم الحقن خلال تناول الدواء. **ملاحظة: المضخة تكون دون صوت في أثناء حقن الدواء.**

بنهاية الحقن:

17. عندما تصبح حقنة الدواء فارغة، يكون الحقن قد اكتمل. حول المضخة إلى وضع التعطيل.
18. قم بفصل الأنبوب من غطاء الحقن للقسطرة الوريدية.
19. إذا كانت هناك جرعة دواء أخرى ستعطى باليوم نفسه، فضع غطاء طرف الحقنة ذا اللون الأزرق الفاتح بنهاية الأنبوب، للحفاظ عليه معقماً. ستعيد استخدام الأنبوب عند تناول الدواء لأكثر من مرة باليوم من خلال إرفاق حقنة دواء جديدة.
20. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
21. قم بتوصيل محقنة كلوريد الصوديوم/المحقنة الملحية بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية، واغسل القسطرة الوريدية وفقاً لتعليمات الممرضة.
22. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.



إذا كانت القسطرة تتطلب استخدام الهيبارين: أكمل الخطوات 23-25، وإلا تجاوز للخطوة 26.

23. نظّف غطاء الحقن بنهاية القسطرة الوريدية بمسحة كحولية جديدة بقوة لمدة 30 ثانية، ثم دع الهواء يجفها لمدة 60 ثانية.
24. قم بتوصيل محقنة الهيبارين المعبأة مسبقًا بغطاء الحقن في القسطرة الوريدية وقم بغسل القسطرة الوريدية وفقًا لتعليمات الممرضة.
25. قم بفصل الحقنة من غطاء حقن القسطرة الوريدية وتخلص منها.
26. دقق أي تجويف أنبوبي إضافي كما هو موضح بخطة الدواء لديك.
27. أعد لف المقبض باتجاه عقارب الساعة، لتحريك اللسان الأسود لنهاية المسار.
28. أزل حقنة الدواء الفارغة من المضخة. اترك الحقنة الفارغة مرفقة بالأنبوب. (تخلص من الحقنة والأنبوب إذا انتهت عمليات الحقن لليوم)
29. غسل الأيدي بشكل كامل، لمدة 20 ثانية على الأقل.

****جميع التجهيزات والنفايات يمكن وضعها في كيسين والتخلص منها مع القمامة المنزلية****

ملاحظات: