


## MEDICACIÓN ADMINISTRADA A TRAVÉS DE BOMBA FREEDOM 60

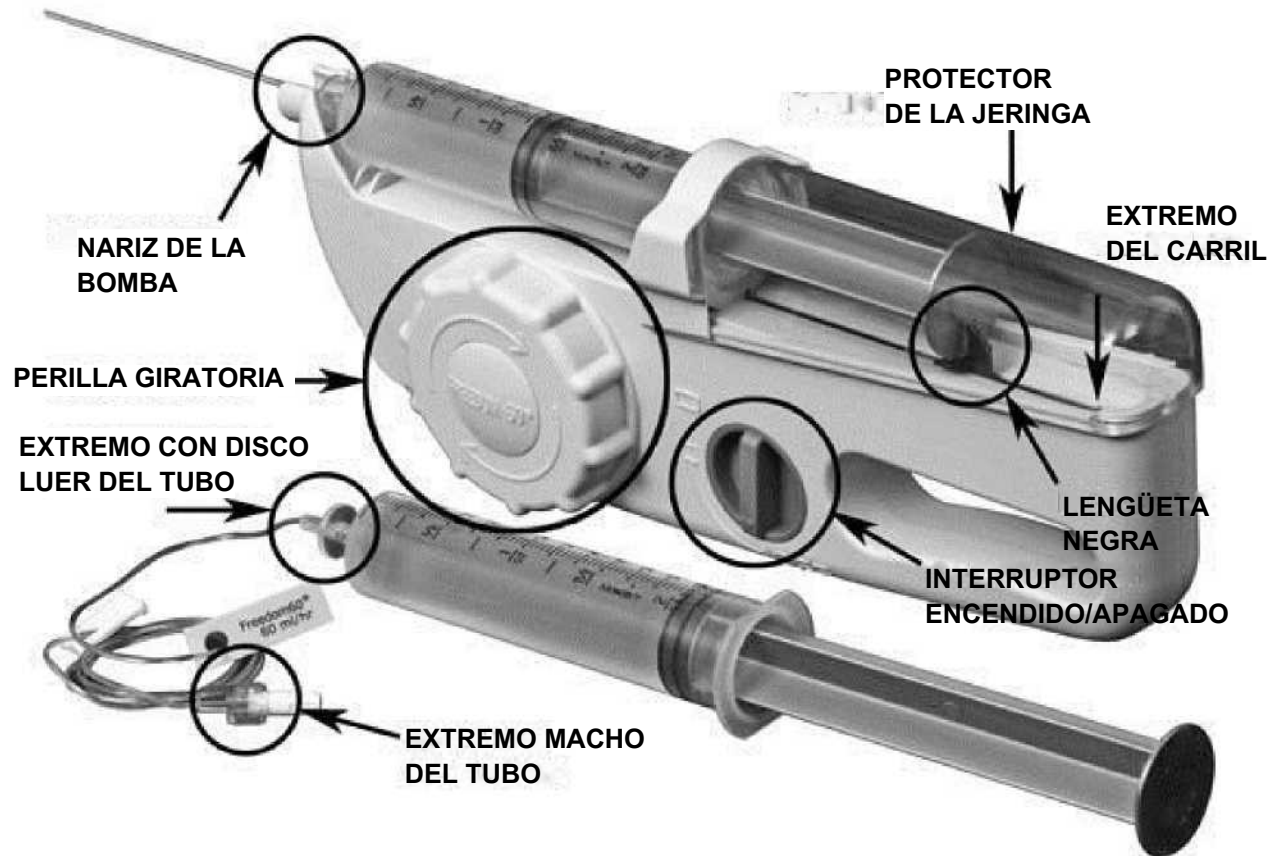

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación a través de la bomba de jeringa Freedom 60 en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>



### INSUMOS:

- Jeringa con la medicación
- Tubos Freedom 60/Precision Flow (los tubos deben cambiarse A DIARIO)
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina
- (1) Tapa de punta de jeringa azul claro, si se indica.
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico

### PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina \_\_\_ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina \_\_\_ ml
- H** Heparina \_\_\_ ml (si es necesario)

### PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la jeringa de medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.

**ALERTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Verifique que tenga el tubo Freedom 60/Precision flow correcto. La tasa impresa en el empaque debe coincidir con la tasa indicada por su médico (verifique la etiqueta de la receta).**

4. Retire el tubo del empaque.
5. Conecte el tubo Freedom 60/Precision al extremo con disco luer de la jeringa del medicamento (retire las tapas transparente y roja de la jeringa del medicamento).
6. Asegúrese de que la bomba Freedom esté en posición **OFF** (apagado) y la lengüeta negra esté en el extremo del carril. Para mover la lengüeta negra, gire la perilla grande hacia la derecha hasta que escuche un clic. **NO GIRE EN EXCESO.**

### ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO:

7. Inserte la jeringa del medicamento con el tubo conectado, con el extremo del émbolo primero en la cubierta transparente de la bomba. Asegúrese de que el extremo con disco luer del tubo quede asentado firmemente en la nariz de la bomba. (Vea el video con instrucciones).



7-01-001

**MEDICACIÓN ADMINISTRADA A TRAVÉS DE BOMBA FREEDOM 60**

8. Gire la bomba hasta la posición **ON** (encendido) para llenar el tubo Freedom 60/Precision. Retire la tapa de la punta HASTA que observe una gota de líquido en el extremo del tubo; vuelva a colocar la tapa de la punta. **NOTA: Mantenga la jeringa en su lugar HASTA que la lengüeta negra encastre en la jeringa para evitar que se salga de lugar.**
9. Coloque la bomba en posición **OFF** (apagado).
10. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
11. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
12. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
13. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol nueva vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
14. Retire la tapa protectora del extremo del tubo Freedom 60/Precision y conecte el tubo a la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. **\*Tenga cuidado para evitar tocar la punta del tubo\*\*.**
15. Coloque la bomba en posición **ON** (encendido).
16. Administre la medicación con la bomba Freedom de acuerdo con su plan de tratamiento de Chartwell, controlando el progreso de la infusión mientras se dispensa el medicamento. **Nota: La bomba es silenciosa durante la infusión del medicamento.**

**AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:**

17. Cuando la jeringa de medicación está vacía, la infusión está completa. Coloque la bomba en posición **OFF** (apagado).
18. Desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
19. Si debe administrar otra dosis de la medicación el **mismo** día, coloque una tapa azul claro en la punta de la jeringa en el extremo del tubo para mantenerla estéril. Cuando administre más de una infusión por día, debe conectar una nueva jeringa de medicación para reutilizar el tubo.
20. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.



7-01-001

**MEDICACIÓN ADMINISTRADA A TRAVÉS DE BOMBA FREEDOM 60**

21. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
22. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

**Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 23 a 25; de lo contrario, siga al paso 26.**

23. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol nueva vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
24. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
25. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
26. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
27. Gire la perilla hacia la derecha para mover la lengüeta negra hasta el extremo del carril.
28. Retire la jeringa de medicación vacía de la bomba. Deje la jeringa vacía conectada al tubo. (Deseche la jeringa y el tubo si ya completó todas las infusiones del día).
29. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**\*\*Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.\*\***

**NOTAS:**