

## ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA POR GRAVEDAD CON VIAL MATE DE 10 GOTAS POR MINUTO

Para su seguridad, es importante que administre correctamente su medicación por gravedad/Vial Mate en casa. Llame al 1-800-755-4704 si tiene preguntas o inquietudes durante la administración del medicamento. Estamos disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. En caso de emergencia, siempre llame al 911.

Para ver guías y videos educativos:

<https://chartwellpa.com/patients/patient-teaching-guides.asp>

### INSUMOS:

- Bolsa intravenosa con vial de medicación conectado
- Tubo intravenoso (**el tubo se debe cambiar DIARIAMENTE**)
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- (1) Tapa estéril azul claro
- Portasueros IV


### PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina \_\_\_ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina \_\_\_ ml
- H** Heparina \_\_\_ ml (si es necesario)

### PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
3. Consulte las etiquetas del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la bolsa con la medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Comuníquese con Chartwell si hay discrepancias o inquietudes.
4. Prepare la medicación como se indica:

#### Activación:

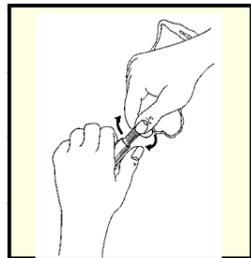

Paso 1:

Para mezclar, sostenga la pinza blanca del vial firmemente en una mano y el adaptador de puerto azul en la otra. Gire ligeramente para alinear las nervaduras del adaptador de puerto azul y la pinza blanca del vial.



**Paso 2:**  
Empuje el adaptador de puerto azul completamente dentro de la pinza blanca.


**Reconstitución:**



**Paso 1:**  
Sostenga la bolsa por encima del vial. Exprima suavemente la solución hasta que el vial esté lleno hasta la mitad.



**Paso 2:**  
Doble el vial hacia arriba de forma que se apoye sobre la bolsa de la solución intravenosa. Mientras sostiene el vial y la bolsa juntos, agite para mezclar el fármaco en la solución.

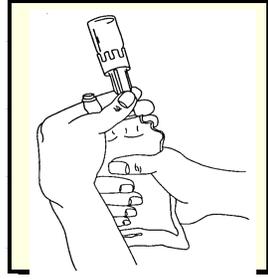**Paso 3:**

Sostenga la bolsa con el vial hacia abajo. Exprima la bolsa para hacer entrar aire al vial. Suelte para drenar el fármaco suspendido en el vial. Repita estos pasos hasta que el vial esté vacío de fármaco y la solución esté bien mezclada. **\*\*NO retire el vial del fármaco de la bolsa.\*\***

### Después de reconstituir el fármaco:

5. Retire el tubo de gravedad con el filtro en línea del empaque. Cierre la pinza con rodillo.
6. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
7. Retire la cubierta de la espiga en el tubo e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**
8. Cuelgue la bolsa de medicación en el portasueros. Exprima la cámara de goteo para llenarla hasta la mitad.
9. Abra lentamente la pinza de rodillo e invierta el filtro hasta que el tubo se llene de líquido completamente para llenar toda la longitud del tubo con medicación. Cuando observe una gota de fluido en el extremo del tubo, cierre la pinza de rodillo.
10. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
11. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
12. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
13. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
14. Retire la tapa protectora del extremo del tubo de gravedad tubo y conecte el tubo a la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. **\*\*Tenga cuidado para evitar tocar la punta del tubo\*\*.**

15. Para administrar su medicación, abra lentamente la pinza de rodillo para comenzar la infusión. Ajuste la pinza de rodillo hasta el número deseado de gotas y controle la tasa de flujo durante la infusión. Ajuste la pinza de acuerdo con su Plan de tratamiento de la farmacia de Chartwell (Plan of Treatment, POT). **\*\*Nota: Consulte la Tabla de conversión para calcular las gotas por minuto.**

### **AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:**

16. Cuando la bolsa de medicación se vacíe, cierre la pinza de rodillo y desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
17. Si debe administrar otra dosis de la medicación el **mismo** día, coloque una tapa de protección azul claro en el extremo del tubo para mantenerla estéril. (**\*\*Vea la siguiente nota**).
18. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
19. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
20. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

### **Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 21 a 23; de lo contrario, omita.**

21. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
22. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
23. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
24. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
25. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**\*Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.**

**\*\*Nota: El tubo de gravedad debe cambiarse DIARIAMENTE. Cuando administre más de una infusión por día, debe conectar una nueva bolsa de medicación para reutilizar el tubo.**

<b>TABLA DE CONVERSIÓN</b> <b>ML/H→GOTAS/MINUTO</b> <b>(TUBO DE 10 GOTAS POR ML)</b>	
1	6
2	12
3	18
4	24
5	30
6	36
7	42
8	48
9	54
10	60
11	66
12	72
13	78
14	85
15	90
16	96
17	102
18	108
19	114
20	120
21	126
22	132
24	144
25	150
30	180
33	198
34	204
35	210
40	240
42	252

**NOTAS:**